

TRUEtrack®

Owner's Booklet



Call for assistance
Monday - Friday,
8AM-8PM Eastern Standard Time
English or Spanish
1-800-803-6025
www.trividiahealth.com

Manufactured by:



Fort Lauderdale, FL 33309 U.S.A.

© 2018 Trividia Health, Inc. TRUEtrack and the Trividia Health logo are trademarks of Trividia Health, Inc.
A4TVH03 Rev. 44

TRUEtrack[®]

Two simple steps

1 INSERT TEST STRIP



2 APPLY BLOOD SAMPLE



For quick reference only, not intended as a substitute for complete instructions. Please read entire Owner's Booklet and product Instructions for Use before testing.

Welcome to the TRUetrack® Blood Glucose Monitoring System

Congratulations on your purchase of the TRUetrack Blood Glucose Monitoring System. You now have a very simple and accurate way to test your blood glucose (sugar) level, anytime, anywhere.

Our Commitment to You

Our goal is to provide you with quality healthcare products and dedicated customer service. If you have questions about using TRUetrack products, visit our web site at: www.trividiahealth.com.

Instructions for use of the System in a professional multi-patient setting are included in the Quality Assurance/Quality Control Manual. The QA/QC Manual is available, call 1-800-803-6049 or 1-954-677-4599.

CAUTION!

Please read complete Owner's Booklet and all product Instructions for Use.

Expected Results for people without diabetes¹:

	Plasma Blood Glucose Result
Before eating	< 100 mg/dL
Two hours after meals	< 140 mg/dL

Importance of Blood Glucose Monitoring

The more you know about diabetes, the better you will be able to take care of yourself. A Doctor or Diabetes Healthcare Professional will determine your target range for your blood glucose results and how often to test. Having the majority of your results within your target range helps slow or stop complications of diabetes.

Having most blood glucose results within your target range shows how well a treatment plan is working to control glucose levels. NEVER change your treatment plan without consulting with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional.

Use of the TRUEtrack in a manner not specified in this Owner's Booklet is not recommended and may affect your ability to determine your blood glucose.

FOR PATIENTS
IMPORTANT HEALTH and SAFETY
INFORMATION:

WARNING!

NEVER reuse Test Strips. **NEVER** wipe Test Strips with water, alcohol or any cleaner. **DO NOT** attempt to remove blood or control sample from Test Strips or clean Test Strips and re-use. Reuse of Test Strips will cause inaccurate results.

- **NEVER** add a second drop of sample to Strip. Adding more sample gives an error message.

The TRUtrack Blood Glucose Monitoring System is for one person use **ONLY**. **DO NOT** share your Meter or your Lancing Device with anyone, including family members. **DO NOT** use on more than one person. **ALL** parts of your Blood Glucose Monitoring System could carry blood-borne diseases after use, even after cleaning and disinfection.^{2,3}

For cleaning and disinfecting your Meter see Meter Care, Cleaning/Disinfection. For cleaning and disinfecting your Lancing Device see the Instructions for Use.

Caution! We suggest cleaning the Meter when visibly dirty. Wash your hands thoroughly with soap and warm water after handling the Meter, Lancing Device, or Test Strips as contact with blood presents an infection risk.

IMPORTANT INFORMATION:

Health Related Information

DO NOT perform capillary blood glucose testing on critically ill patients. Capillary blood glucose levels in critically ill patients with reduced peripheral blood flow may not reflect the true physiological state. Reduced peripheral blood flow may result from the following conditions (for example):⁴

- shock
- severe hypotension
- severe dehydration
- hyperglycemia with hyperosmolarity, with or without ketosis.
- Low blood glucose (hypoglycemia) symptoms may be:
 - trembling, sweating, intense hunger, nervousness, weakness, and trouble speaking.
- High blood glucose (hyperglycemia) symptoms may be:
 - intense thirst, a need to urinate often, a dry mouth, vomiting, and headache.

If you have any of these symptoms, check your blood glucose. If your result does not match the way you feel, repeat the test. If your results still do not match the way you feel, call your Doctor or Healthcare Professional.

Important Information

For the most accurate results using TRUEtrack:

- **Read all instructions** before testing.
- **TRUEtrack is an *in vitro* (outside body) quantitative system that is used for self-testing and point-of-care (bedside) testing of human whole blood only.**
- **Check Codes.** Code in Meter Display must match Code on vial of TRUEtrack Test Strips being used and Code Number printed on Code Chip.
- **Meter displays results as plasma values.**
- **Use only TRUEtrack Test Strips and TRUEcontrol[®] Glucose Control Solution with TRUEtrack Meter.**
- **Do not use for diagnosis of diabetes or for testing blood glucose in newborns.**
- **The TRUEtrack is recommended for testing of human capillary whole blood only.** TRUEtrack is not recommended for use with venous samples.
- **Perform Quality Control Testing before performing a blood test for the first time.**

***Note:** Three levels of TRUEcontrol Glucose Control Solution are available for Quality Control Testing. We recommend testing at least 2 levels of Control. Contact place of purchase or call for assistance to obtain Control.*

- **Set date and time** for correct Morning Average values.
- When using the meter for the first time, check the unit of measure in the meter Display after performing a control or blood test. Result must display in the correct unit of measure (mg/dL).
- If the result does not display in the correct unit of measure, **DO NOT** use the meter and **DO NOT** use the meter result to determine treatment.

WARNING: Upon opening the test strip carton, examine the product for missing, damaged or broken parts. Ensure the test strip vial cap is securely closed. If the product is damaged or the vial cap is not closed, DO NOT use the test strips for testing; product may give inaccurate results. Contact Trividia Health Customer Care at 1-800-803-6025 for replacement and assistance.

Health Related Information

For Healthcare Professionals:

If comparing results between TRUEtrack and a lab system, perform a TRUEtrack blood test within 30 minutes of lab test. Results from TRUEtrack are considered accurate if within +/- 20% of lab results.⁵ If patient has recently eaten, fingerstick results from TRUEtrack can be up to 70 mg/dL higher than venous lab results.⁶ Do not use venous blood with TRUEtrack.

Instructions for use of the System for more than one person may be found in the Quality Assurance/Quality Control Manual. The QA/QC Manual is available, call 1-800-803-6025 or 1-954-677-4599.


Table of Contents

Fast Test Guide.....	inside front cover
Introductory Information	1-6
Know Your System	
Meter	8-10
Test Strip	11
Test Strip Vial Label	12
Control Bottle Label.....	13
Getting Started	14
Coding	15-16
Quality Control Tests.....	17
Automatic Self Test.....	17
Control Test.....	18-21
Testing your Blood	
How to Obtain a Blood Sample.....	22-23
How to Test Blood Glucose.....	24-25
System Out of Range Warning Messages.....	26
Set Up (Time, Date)	27-28
Memory	
Morning Averages (14 and 30 Day).....	29
Viewing Results in Memory	30
Care, Cleaning/Disinfection and Troubleshooting	
Caring for TRUEtrack	31-32
Changing Battery.....	33
Troubleshooting.....	34
Display Messages	35-37
System Specifications.....	38
Chemical Composition.....	39
Meter Warranty	40
References.....	40

Know Your System

Meter


Top of Meter

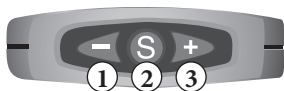

Front of Meter




- ① **← Button** - Decrease numbers in Set Up; remove Control Symbol; move backward by time/date when viewing results in Memory.
- ② **S Button** - Select settings; view Morning Average values; view results in Memory.
- ③ **→ Button** - Increase numbers in Set Up; add Control Symbol; move forward by time/date when viewing results in Memory.
- ④ **Display** - Shows test results, messages, user prompts, and other information.
- ⑤ **Test Port** - Insert TRUEtrack Test Strip here.

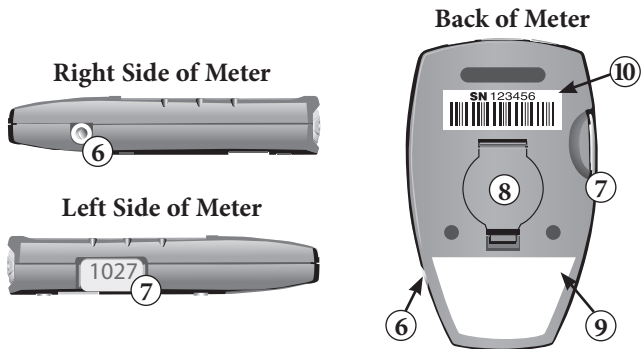

- ⑥ **Data Port** - Contact Customer Care at the number located on cover for more information.
- ⑦ **Code Chip Port** - Insert the Code Chip here.
- ⑧ **Battery Compartment** - Use one non-rechargeable 3V lithium battery (#CR2032), positive (“+”) side up.
Note: See Changing Battery for details.
- ⑨ **Meter Label** - Contains telephone number for assistance.
- ⑩ **Serial Number Label** - Identifies Meter when calling for assistance.

Display

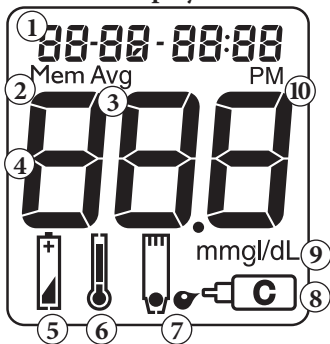

1. Time, Date, 14/30 Day Average, Code.
2. Result in Memory.
3. 14- or 30-Day Morning Average.
4. Test result.
5. Battery Symbol (see *Display Messages*).
6. Temperature Symbol (see *Display Messages*).
7. Drop Symbol - Apply blood or Glucose Control.
8. Control Symbol (see *Glucose Control Test*).
9. Unit of Measure.
10. Time is P.M.

Note: *Factory Set. Cannot be changed by user.*

Note: “AM” does not appear. “PM” is not an option if factory setting is for 24-hour clock.

Test Strip

Front of Test Strip



- ① **Contact End** - Insert into Meter with Contacts (metallic blocks) facing up *before* adding sample.
- ② **Sample Tip** - Touch sample (blood or Glucose Control) to edge of Tip.

Placement of Sample to Test Strip



Correct

Incorrect

- Allow sample (blood or Glucose Control drop) to be drawn into Sample Tip.



Contacts
Face Up

Caution! *Holding the Test Strip Sample Tip to the blood sample too long after the Meter begins testing may cause inaccurate results.*

Note: *Do not apply blood or Glucose Control to top of Test Strip.*

- Do not smear or scrape drop with Test Strip.
- Do not apply more sample to Test Strip after removing from drop.

Note: *Do not insert Sample Tip with sample into Meter for testing. May damage meter.*

Test Strip Vial Label

	CODE	1027		①
②	LOT	EA645A4		
	EXP	2018/10/31		③
	0	31-61 mg/dL		
	1	87-117 mg/dL		④
	2	247-335 mg/dL		
	<i>May</i>	<i>30, 2018</i>		③

- ① **Code** - Match Code in Meter Display with Code on Code Chip **and** Code on Test Strip vial label **before** testing. All Codes **MUST** match for accurate results.
- ② **Lot Number (LOT)** - Used for identification when calling for assistance.
- ③ **Expiration Dates (EXP)** - Write date first opened on vial label. Discard vial and unused Test Strips 120 days after written date or date printed next to EXP, whichever comes first.
- ④ **Control Range** - Range of numbers in which Control Test result must fall to assure System is working properly.

Caution! *Use of Test Strips or Glucose Control past the Expiration Dates may give incorrect test results. Discard out-of-date products and test with new products.*

Glucose Control

Control Bottle Label



- ① **Lot Number (LOT)** - Used for identification when calling for assistance.
- ② **Expiration Dates (EXP)** - Write date first opened on bottle label. Discard bottle if either 3 months after opening or date printed next to EXP on bottle label has passed, whichever comes first.
- ③ **Control Level (0, 1, or 2)** - Three levels of TRUEcontrol Control are available. We recommend testing at least 2 levels of Control. Use the number on the cover for information on how to obtain different levels of Control.

Getting Started

The Meter turns on automatically when a Test Strip Contact End is inserted into the Test Port or when **S** is pressed (*see Set Up and Memory*).

The Meter turns off automatically after the Test Strip is removed from the Test Port or after 2 minutes of non-use.

Meter comes with pre-set time and date. Before using the Meter for the first time or after a battery change, check the time and date and update as needed (*see Set Up*).

Coding

Code Chip is packaged with each box of Test Strips.

Note: *After all Test Strips are used from box, remove Code Chip from Meter and discard. Open new box of Test Strips and insert new Code Chip into Meter before testing.*

1. Start with Meter off. Remove and open Code Chip package from box of Test Strips to be used. Match Code printed on Code Chip to Code printed on vial label.



Caution! *If Codes do not match, do not use Test Strips. Call for assistance.*


2. If Codes match, insert Code Chip into Code Chip Port as shown, locking in place.



3. Insert Test Strip into Test Port.
Meter turns on. “Code” and number
appear in Display.



4. Match to Code number
on vial label. If Codes
match, begin testing.

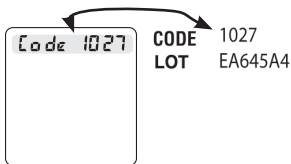

Caution! *If “Code ----” shows in Display, reinsert Code Chip and then reinsert Test Strip. If “Code ----” still shows in Display or if Codes do not match, **DO NOT** use Test Strips. Test results could be incorrect. Call for assistance.*

Quality Control Testing

To assure you are getting accurate and reliable results, TRUtrack offers two kinds of quality control tests. These tests let you know that your TRUtrack System is working properly and your testing technique is good.


Automatic Self-Test

An Automatic Self-Test is performed by the Meter each time a Test Strip is inserted correctly into the Test Port.


Insert a Strip into the Test Port.
The Meter is working properly if:

- the full Display appears, then
- the time appears in the upper part of the Display, and then,
- the Drop Symbol begins to blink

If an error message appears in the Display, the Meter will not perform a test. See Troubleshooting or call for assistance (see cover for phone number).

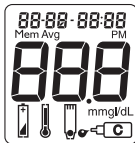

Full Display

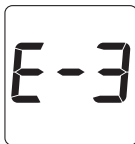

Caution! *If any segments are missing in the Display when Meter is first turned on, do not use the Meter for testing. Call for assistance.*

Control Test

We recommend performing Control Tests for practice before using your Meter for the first time to test your blood.

Control Tests should be performed:

- For practice to ensure your testing technique is good,
- Occasionally as you use the vial of Strips,
- When opening a new vial of Strips,
- If results seem unusually high or low,
- If a vial has been left open or exposed to extreme heat or cold, or humidity,
- If Meter damage is suspected
(Meter was dropped, crushed, wet, etc.)

Note: *Three levels of TRUEcontrol Glucose Control Solution are available for Quality Control Testing. It is important to perform Control Tests with more than one level of Control to assure your System is working properly and your testing technique is good. Contact place of purchase or call for assistance to obtain Control.*

Caution! *Control ranges printed on Test Strip vial label are for Control Test results only and **are not** suggested levels for your blood glucose.
Do not drink Glucose Control.*

Only the most current Control Test result is stored in Memory.

How to Test Glucose Control

Use **ONLY** TRUEcontrol Glucose Control Solution with the TRUEtrack Meter

1. Wash hands with soap and water, dry thoroughly. Allow Control, vial of Test Strips and Meter to adjust to room temperature (68-77°F). Write date first opened on Control Label and/or Test Strip vial label.
2. Check dates on Control label and Test Strip vial label. Do not use Control if 3 months past written opened date *or* past date printed next to EXP, whichever comes first. Do not use Test Strips 120 days past written opened date *or* past date printed next to EXP, whichever comes first. Discard out-of-date products and use new products if either date has passed.
3. Swirl or invert bottle gently to mix Control. **DO NOT SHAKE!**
4. Remove Test Strip from vial. Recap vial immediately.

Note: Use Test Strip quickly after removal from vial. Test Strips that have been left out of vial too long will give an error message. If error message appears in Display, discard old Test Strip and test with new Test Strip.

5. Insert Test Strip Contact End (Contacts facing up) into Test Port. Meter turns on. Keep Test Strip in Meter until testing is finished.


LOT	8LOA18
EXP	2018/10/31
CODE	1027
LOT	EA645A4
EXP	2018/10/31
0	31-61 mg/dL
1	87-117 mg/dL
2	247-335 mg/dL
May 30, 2018	




Contacts
Face Up

6. Match Code in Display with Code on Test Strip vial label being used. If Codes do not match, see *Coding*.

7. Press . Control Symbol appears in Meter Display.

Note: *If you decide not to perform a Control Test, press  to remove Control Symbol.*

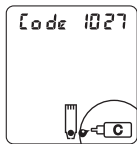

Control Symbol


8. Turn Control bottle upside down. Squeeze one drop of Control onto a clean tissue. Wipe off bottle tip.



9. Gently squeeze a drop on a small piece of unused aluminum foil or clear plastic wrap. Dispose after use.



10. With Test Strip still in Meter, touch edge of Sample Tip to drop of Control and allow drop to be drawn into Test Strip. Remove Test Strip from drop when Meter beeps. Meter begins countdown.

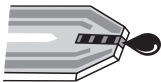

Note: If Meter does not beep or begin countdown soon after placing Sample Tip to Control drop, discard Test Strip. Repeat test with new Test Strip. If problem persists, see Troubleshooting.


11. Compare result to Control range printed on Test Strip vial label. If result is in range, System can be used for testing blood. If result does not fall within range, repeat test using a new Test Strip.

Note: Control Test result shows the Control Symbol in the Display.

Note: When using the meter for the first time, check the unit of measure in the meter Display after performing a control or blood test. Result must display in the correct unit of measure (mg/dL). If the result does not display in the correct unit of measure, **DO NOT** use the meter and **DO NOT** use the meter result to determine treatment.



0	31-61	mg/dL
1	87-117	mg/dL
2	247-335	mg/dL

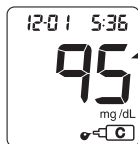

Caution! If Control Test result is outside range, test again. If result is still outside range, System should not be used for testing blood. Call for assistance (see cover for phone number).

12. Remove Strip from Meter and discard. Meter turns off. Recap Control bottle tightly.

Obtaining a Blood Sample

Refer to Lancing Device “Instructions for Use” for detailed instructions.

Caution! *The Lancing Device is for single patient use ONLY. For cleaning/disinfecting your Lancing Device see Lancing Device Care in the Lancing Device Instructions for Use. Wash your hands thoroughly with soap and warm water after handling the Meter Lancing Device, or Test Strips. Contact with blood presents an infection risk.*

- Never share lancets or lancing device.
- Lancets are for single use only. Do not re-use.

From Fingertip

1. Prepare fingertip by washing hands in warm, soapy water. Rinse well. Dry thoroughly.
2. Place end of Lancing Device against tip of finger. Lance fingertip.
3. Set Lancing Device aside. To help blood drop form, lower hand to waist level, gently massaging finger from palm to fingertip. Allow blood drop to form before attempting to apply to Test Strip.




Always recap, remove and discard used Lancet in appropriate container when testing is complete.

Note: *Used Strips and lancets are considered biohazardous. Dispose used Strips and lancets in approved biohazard container.*

From Forearm

1. Select area to be lanced. Wash with soap and warm water, rinse and dry thoroughly.
2. Rub area vigorously or apply a warm compress to increase blood flow.
3. Place end of Lancing Device firmly against forearm. Press trigger button. Apply firm pressure on lancing device for 10 seconds.

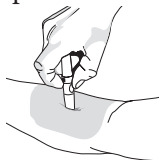

Note: *Some lancing devices include a special end cap for alternate site testing. Check lancing device Instructions for Use.*

Important Notes Regarding Forearm Testing⁷

- Check with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional to see if forearm testing is right for you.
- Results from forearm are not always the same as results from fingertip.
- Use fingertip instead of forearm for more accurate results:
 - Within 2 hours of eating, exercise, or taking insulin,
 - If your blood sugar may be rising or falling rapidly or your routine results are often fluctuating,
 - If you are ill or under stress,
 - If your forearm test results do not match how you feel,
 - If your blood sugar may be low or high,
 - If you do not notice symptoms when blood sugar is low or high.

How to Test Blood Glucose

Check supplies. Always check your supplies before using. Check Meter for damage (damaged or cracked Display, missing or damaged buttons). If any damage is seen, do not use Meter. Call for assistance. Check Test Strip vials for damage. Discard any vials that appear cracked or broken.

1. Check dates on Test Strip vial being used. Do not use if 120 day past written date or date printed next to EXP, whichever comes first.
2. Wash hands (and forearm for alternate site testing). Rinse well and dry thoroughly.
3. Remove Test Strip from vial. Recap vial immediately.

Note: Use Test Strip quickly after removal from vial. Test Strips that have been left out of vial too long will give an error message when used. Discard old Test Strip and use new Test Strip for testing.

4. With Meter off, insert Test Strip Contact End (Contacts facing up) into Test Port. Meter turns on. Keep Strip in Meter until testing is finished.



- Match Code in Display to Code on Test Strip vial being used. If Codes do not match, see *Coding*.
- Drop Symbol appears in Display.
- Lance fingertip or forearm. Allow drop to form.
- With Test Strip still in Meter, touch edge of Sample Tip to blood drop and allow blood to be drawn into Strip. Remove Test Strip Sample Tip from sample drop immediately after the Meter beeps and starts to countdown on Meter Display.




Caution! *Holding the Test Strip Sample Tip to the blood sample too long after the Meter begins testing may cause inaccurate results.*

Note: *If Meter did not beep or begin countdown soon after touching blood drop to Sample Tip, discard Test Strip. Repeat test with new Test Strip and new blood drop. If problem persists, see Troubleshooting.*

- After countdown, result is displayed with date and time. Remove Test Strip and discard. Result is stored in Memory. Meter turns off.

Note: *When using the meter for the first time, check the unit of measure in the meter Display after performing a control or blood test. Result must display in the correct unit of measure (mg/dL). If the result does not display in the correct unit of measure, **DO NOT** use the meter and **DO NOT** use the meter result to determine treatment.*

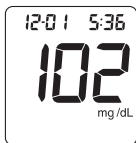

- Record result in log book.


Note: *Used Test Strips and lancets are considered biohazardous. Dispose used Test Strips and lancets in approved biohazard container.*

System Out of Range Warning Messages

CAUTION!

TRUEtrack measures blood glucose results from 20-600 mg/dL.

If blood glucose result is less than 20 mg/dL, “Lo” appears in Meter Display.

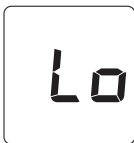

If blood glucose result is greater than 600 mg/dL, “Hi” appears in Meter Display.




Always repeat test to confirm Low (“Lo”) and High (“Hi”) results. If results still display “Lo” or “Hi”, call your Doctor or Diabetes Healthcare Professional *immediately*.

Note: “Lo” results are included in the Morning Average as 20 mg/dL. “Hi” results are included as 600 mg/dL.

Set Up (Time/Date)

1. Start with Meter off. Do not insert Test Strip.

Press and hold **S**. Date/Time appears in display. Release **after** full Display appears and Meter beeps.

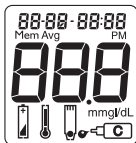


Full Display

Set Time

2. The hour flashes.

To change, press **➤** or **➤** (on top of Meter to select the hour. Like many alarm clocks, to set “PM”, scroll through hours until “PM” appears in Display.

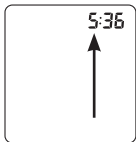

Hour

Note: “PM” does not display if Meter is factory set to 24-hour clock.


Press **S** to set.



PM

3. The minutes flash.


To change, press **➤** or **➤** to select the minutes. Press **S** to set.

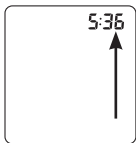

Minutes

Set Date

- The month (number) flashes.
To change, press **➤** or **➤** to select the month. Press **S** to set.
- The day (number) flashes.
To change, press **➤** or **➤** to select the day. Press **S** to set.
- The year flashes
To change, press **➤** or **➤** to select the year. Press **S** to set.

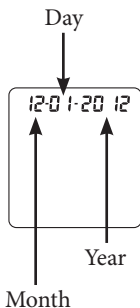

Exit Set-up

To review settings, press **S**. Make changes as needed, per instructions above.
Press and hold **S** until Display goes blank.
Options are saved. Meter turns off.

Memory

Morning Averages (14 and 30 Day)

For Morning Average values, only the earliest blood test result performed between 4:00 am - 9:59 am (according to Meter clock) is used. Meter clock must be set correctly (see *Set Up*) for accurate Morning Average values.


1. Start with Meter off. Press and release **S**. Display shows 14 day Morning Average value and then 30 day Morning Average value.
2. Meter switches between 14 and 30 day Morning Average values for 2 minutes before turning off.
3. If there are no Morning Average values, 3 dashes are displayed.
4. Press and release **S** to view results in Memory. Press and hold **S** to turn Meter off, or Meter turns off after 2 minutes of inactivity.



14 Day
Average



30 Day
Average

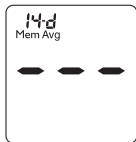

No
Averages

Viewing Results in Memory

Memory stores 365 results, which are displayed from most recent to oldest. The oldest result is removed from Memory when Memory is full and a new result is added.

1. Start with Meter off. Press and release **S**. Meter displays date and time followed by 14 and 30 Day Morning Averages. Press **S** again to view most recent result in Memory.



Memory

2. Press **➤** and release to advance to the first blood glucose result in Memory.
3. Press **➤** and release again to view the latest Control Test result. The Control Test result shows the Control Symbol in Display. Only one Control Test result is stored in Memory.



Control Symbol

4. Continue to press and release **➤** to advance through the blood glucose results. Holding **➤** scrolls through the results quickly. Press and release **◀** to reverse through the results.
5. Press and hold **S** to turn Meter off. Meter also turns off automatically after 2 minutes of inactivity.

Caring for TRUEtrack

- Store System (Meter, Glucose Control, Test Strips) in Carrying Case to protect from liquids, dust and dirt.
- Store in a dry place at room temperature (36-86°F).
DO NOT REFRIGERATE OR FREEZE.
- Do not keep meter in an area where it may be crushed (i.e. back pocket, drawer, bottom of bag, etc.).

Meter Care, Cleaning/Disinfection

To Clean the Meter (removing blood or soil):

Cleaning removes blood and soil, disinfecting removes infectious agents.

- We suggest cleaning your Meter when visibly dirty. Never put Meter in liquids or allow any liquids to enter the Test Port.
- Wipe Meter with a clean, lint-free cloth dampened with 70% Isopropyl alcohol.
- Let Meter air dry thoroughly before using to test.
- Do not use bleach to clean the Meter.

For assistance contact Customer Care using the phone number on the cover of the Owner's Booklet.

For Healthcare Professionals, please refer to the Quality Assurance/Quality Control Manual for instructions on Meter care, cleaning and disinfection.

Instructions for use of the System for more than one person may be found in the Quality Assurance/Quality Control Manual. The QA/QC Manual is available, call 1-800-803-6025 or 1-954-677-4599.

Glucose Control Care

- Write date opened on Control label. Discard 3 months after opening or after date printed next to EXP, whichever comes first.
- After use, wipe bottle tip clean and recap tightly.
- Store at room temperature (36°-86°F).
DO NOT REFRIGERATE OR FREEZE.

Test Strip Care


- Store Test Strips in original vial only. Do not transfer old Test Strips to new vial.
- Write date opened on Test Strip vial. Discard unused Test Strips from vial 120 days after opening or after date printed next to EXP, whichever comes first. Use of Test Strips past either date may give incorrect results.
- Close vial immediately after removing Test Strip. Use Test Strip quickly after removal from vial. Never store Test Strips outside of vial. Store in a dry place at room temperature below 86°F.
DO NOT REFRIGERATE OR FREEZE.
- Do not reuse Test Strip.
- Do not bend, cut or alter Test Strips in any way.

Code Chip Care

- Code Chip must remain in Meter until all Test Strips from box are used, then discard old Code Chip.
- Insert new Code Chip from new box of Test Strips immediately before using Test Strips.

Changing Battery

Replace battery when Low or Dead Battery Symbols appear in Display or Meter does not turn on.

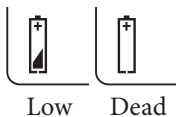

1. Lift tab on Battery Cover.
2. Turn Meter over, tap gently to loosen and remove battery.
3. Insert new battery, positive (“+”) side up. Close cover.


Note: Use non-rechargeable 3V lithium battery (#CR2032).

4. Discard old battery in appropriate container.
5. Turn Meter on. If Meter will not turn on, check that battery was installed properly. If not, reinsert battery and try again. Call for assistance if problem persists.



Warning! Battery is not rechargeable. If you have a cable or a cradle for downloading results to a computer, **DO NOT** plug the usb cable end into an electrical outlet. Trying to recharge the battery or power the meter by plugging into an electrical outlet will cause meter to catch on fire or melt.

Caution! Battery is not rechargeable. Battery might explode if mishandled or incorrectly replaced. Do not dispose of battery in fire. Do not disassemble or attempt to recharge battery. Dispose according to local/country specific regulations.

Note: Replacing battery may affect date and time settings. Check date and time by going to Set Up and scrolling through the time/date settings by pressing .

Troubleshooting

1) After inserting Test Strip, Meter does not turn on.

Reason	Action
Test Strip inserted upside down or backwards	Remove Test Strip. Re-insert correctly.
Test Strip not fully inserted	Remove Test Strip. Re-insert Strip fully into Meter.
Test Strip Error	Repeat with new Test Strip.
Dead or no battery	Replace battery.
Battery in backwards	Battery positive (“+”) side must face up.
Meter Error	Call for assistance.

2) After applying sample, test does not start/ Meter does not beep or begin countdown.

Reason	Action
Sample drop too small	Repeat test with new Test Strip and larger drop.
Sample applied after two minute shut-off	Repeat test with new Test Strip and apply drop after Meter beeps.
Problem with Test Strip	Repeat with new Test Strip.
Problem with Meter	Call for assistance.

Messages

Display




Reason

Temperature Error
Temperature change too quick


Action

Wait 10 minutes for Meter and Test Strips to reach room temperature before testing.

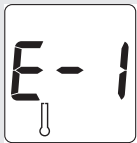

Temperature Too Cold
Meter temperature less than 50°F

Move Meter and Test Strips to area between 50°-104°F before testing.

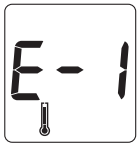


Temperature Too Hot
Meter temperature greater than 104°F

Move Meter and Test Strips to area between 50°-104°F before testing.



Sample Not Detected or Using Wrong Test Strip



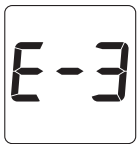


Retest with new or correct Test Strip and larger sample.




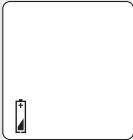
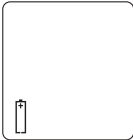
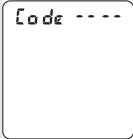


Used Test Strip or Test Strip outside of vial too long.

Repeat with new Test Strip. If error persists, call for assistance.

Messages (continued)

<u>Display</u>	<u>Reason</u>	<u>Action</u>
	Meter Error	Call for assistance.
	Test Strip Error, Very high blood glucose result (higher than 600 mg/dL)	Retest with new Strip. If error persists, call for assistance. If you have symptoms such as fatigue, excess urination, thirst, or blurry vision, follow your healthcare professional's advice for high blood glucose.
	Test Strip Removed During Test	Retest with new Test Strip. If error persists, call for assistance.
	Meter Error	Call for assistance.
	Code Chip Error	Remove Code Chip and reinsert. If error persists, call for assistance.

Messages (continued)

<u>Display</u>	<u>Reason</u>	<u>Action</u>
	Communication Error	Turn Meter off and on again. If error persists, call for assistance.
	Low Battery	About 50 tests can be done before battery must be replaced.
	Dead Battery	Replace battery.
	Code Chip Error	Remove Code Chip and re-insert. If error persists, call for assistance.
 	<u>WARNING!!</u> Out of range - Hi Result > 600 mg/dL Out of range - Lo Result < 20 mg/dL	<u>WARNING!!</u> Retest with new Test Strip. If result is still "Hi" or "Lo" contact Doctor <i>immediately.</i>

System Specifications

Result Range: 20-600 mg/dL

Sample Size: Minimum 1 microliter (1 μ L)

Sample: Human capillary whole blood or
TRUEcontrol Glucose Control Solution

Test Time: 10 seconds

Result Value: Plasma values

Assay Method: Electrochemical

Reference Method: Yellow Springs Instrument (YSI)

Power Supply: One 3V lithium battery
#CR2032 (non-rechargeable)

Battery Life: Approximately 1,100 tests or 1 year

Automatic shut-off: After two minutes of non-use

Weight: 1.66 ounces

Size: 3.52" x 2.15" x 0.67"

Memory Size: 365 blood glucose results,
1 Control Test result

Operating Range (Meter & Test Strips):

Relative Humidity: 10-90% (Non-condensing)

Temperature: 50°-104°F

Hematocrit: 30-55%

Note: *Use within specified environmental conditions only.*

Chemical Composition

TRUEtrack Test Strips: Glucose Oxidase (*Aspergillus sp.*) 2.5 Units, Mediators, Buffers and Stabilizers.

TRUEcontrol Glucose Control: Contents: Volume: 3 mL. Water - 73%, D-glucose - 0.09 - 0.20%, Viscosity Enhancing Agent - 25%, Inorganic Salts - 1.8%, Amaranth - 0.08%, and Preservatives - 0.03%.

TRUEtrack Limited Lifetime Warranty

Trividia Health, Inc. provides the following Warranty to the original retail purchaser of the TRUEtrack Meter:

- 1) Trividia Health, Inc. warrants this Meter to be free of defects in materials and workmanship at the time of purchase. If the meter is ever inoperative, Trividia Health, Inc. will replace the Meter with an equivalent Meter, at its option, at no cost to the purchaser. Failure of the meter due to abuse or use not in accordance with the instructions for use is not covered by this Warranty.
- 2) This Warranty does not include the battery supplied with the Meter.
- 3) Do not take the Meter apart. This action will void the Warranty and cause the Meter to display false results.
- 4) The duration of any implied Warranty, including any implied Warranty of merchantability or fitness for a particular purpose shall be limited to the lifetime in use with the original user in accordance with any state law to the contrary.
- 5) Trividia Health, Inc. disclaims liability for incidental or consequential damages for breach of any expressed or implied Warranty, including any implied Warranty of merchantability or fitness for a particular use with respect to the Meter. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply.
- 6) This Warranty gives the user specific legal rights, and the user may also have other rights which vary state to state.

Your Trividia Health, Inc. Customer Care Representative will be able to provide detailed information regarding procedures for returning your Meter, if necessary.

References

1. American Diabetes Association. *Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus*. Diabetes Care, Volume 37, Supplement 1, January 2014.
2. FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood Borne Pathogens: Initial Communication (2010)<http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices>.
3. CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than one Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>.
4. Atkins, S. H., Dasmahapatra, A., Jaker, M.A., Chorost, M. I., Redd, S., *Fingerstick Glucose Determination in Shock*. Annals of Internal Medicine, 114:1020-1024, 1991.
5. Data on file.
6. Larsson-Cohn U: Difference between capillary and venous blood glucose during oral glucose tolerance tests. Scand J Clin Lab Invest 36:805-808, 1976.
7. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Electronic Version]. Retrieved December 22, 2009 from <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm>.

TRUEtrack®

Libreta del propietario



Llame para recibir ayuda
Lunes - Viernes,
8AM-8PM EST
Inglés o español
1-800-803-6025
www.trividiahealth.com

Fabricado por:



Fort Lauderdale, FL 33309 U.S.A.

© 2018 Trividia Health, Inc. TRUEtrack y el logotipo de Trividia Health son marcas comerciales de Trividia Health, Inc.

TRUEtrack®

DOS pasos simples

1 INSERTE LA TIRA DE PRUEBA



2 APLIQUE LA MUESTRA DE SANGRE



Solo para referencia rápida; no se pretende que sea un sustituto del instructivo completo. Lea toda la Libreta del propietario y las Instrucciones para el uso del producto antes de realizar pruebas.

Bienvenido al sistema de monitoreo de glucosa en la sangre TRUTrack®

Felicitaciones por haber comprado el sistema de monitoreo de glucosa en la sangre TRUTrack. Ahora tiene un método muy simple y exacto para hacerse la prueba del nivel de glucosa (azúcar) en la sangre, en cualquier momento y lugar.

Nuestro compromiso con usted

Nuestro objetivo es proporcionarle productos para la atención de la salud de alta calidad y un dedicado servicio al cliente. Si tiene preguntas sobre los productos TRUTrack, visite nuestro sitio web en: www.trividiahealth.com.

El Manual de garantía y control de calidad contiene instrucciones para usar el sistema en un centro de salud destinado a la atención de varios pacientes. El Manual de garantía y control de calidad está disponible, llame al 1-800-803-6049 o al 1-954-677-4599.

¡PRECAUCIÓN!

Lea toda la Libreta del propietario y todas las Instrucciones para el uso del producto.

Resultados esperados para personas sin diabetes¹:

	Resultado de glucosa en plasma/sangre
Antes de comer	< 100 mg/dl
2 horas después de una comida	< 140 mg/dl

Importancia del control de glucosa en la sangre

Cuanto más sepa sobre la diabetes, tanto mejor podrá cuidarse por sí solo. Un médico o profesional de la salud especialista en diabetes determinará su escala objetivo para los resultados de glucosa en la sangre y con qué frecuencia deberá realizar la prueba. Tener la mayoría de los resultados dentro de su escala objetivo ayuda a disminuir o eliminar las complicaciones de la diabetes.

Si la mayoría de los resultados de glucosa en la sangre están dentro de su escala objetivo, esto demuestra que tan bien funciona el plan de tratamiento para controlar los niveles de glucosa. **NUNCA** cambie su plan de tratamiento sin consultar al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes.

No se recomienda el uso de TRUTrack de una manera distinta de la descrita en esta Libreta del propietario, ya que podría afectar a su posibilidad de determinar su glucosa en la sangre.

PARA PACIENTES INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD y SEGURIDAD:

¡ADVERTENCIA!

NUNCA vuelva a utilizar las tiras de prueba. **NUNCA** limpie las tiras de prueba con agua, alcohol o limpiadores. **NO** intente eliminar la muestra de sangre o de control de las tiras de prueba, ni las limpie para volver a usarlas. Si vuelve a usar las tiras de prueba, los resultados serán inexactos.

- **NUNCA** añada una segunda gota de muestra a la tira. Agregar más muestra genera un mensaje de error.

El sistema de monitoreo de glucosa en la sangre TRUEtrack es para uso de una **SOLA** persona. **NO** comparta su medidor ni su instrumento de punción, ni siquiera con miembros de su familia. **NO** lo use en más de una persona. Una vez utilizado el sistema de monitoreo de glucosa en la sangre, **TODAS** las piezas podrían transmitir enfermedades contenidas en la sangre, incluso después de su limpieza y desinfección.^{2,3}

Para limpiar y desinfectar el medidor, consulte la sección Cuidado del medidor, limpieza/desinfección. Para limpiar y desinfectar el instrumento de punción, consulte las Instrucciones para el uso.

¡Precaución! *Sugerimos limpiar el medidor cuando este visiblemente súaico. Lávese las manos con agua tibia y jabón después de manipular el medidor, el instrumento de punción o las tiras de prueba ya que el contacto con la sangre representa un riesgo de infección.*

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Información relacionada con la salud

NO realice pruebas de glucosa en la sangre capilar en pacientes en estado crítico de enfermedad. Es posible que los niveles de glucosa en la sangre capilar en pacientes con el flujo de sangre periférica reducido que presentan un estado crítico de enfermedad no reflejen el verdadero estado fisiológico. El flujo de sangre periférica reducido puede ser consecuencia de las siguientes condiciones (por ejemplo):⁴

- shock
- hipotensión grave
- deshidratación grave
- hiperglucemia con hiperosmolaridad, con o sin cetosis.
- Los síntomas de baja glucosa en la sangre (hipoglucemia) pueden ser:
 - temblores, sudor, hambre intensa, nerviosismo, debilidad y dificultad para hablar.
- Los síntomas de alta glucosa en la sangre (hiperglucemia) pueden ser:
 - sed intensa, necesidad de orinar con frecuencia, sequedad en la boca, vómitos y dolor de cabeza.

Si tiene cualquiera de estos síntomas, contrólese la glucosa en la sangre. Si el resultado no concuerda con la manera en que se siente, repita la prueba. Si los resultados siguen sin concordar con el modo en que se siente, llame al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes.

Información importante

Para obtener los resultados más precisos al utilizar TRUEtrack:

- **Lea todas las instrucciones** antes de realizar la prueba.
- **TRUEtrack es un sistema cuantitativo *in vitro* (externo al cuerpo) que se usa para pruebas autoadministradas y en centros de salud (al pie de la cama) de glucosa en la sangre humana completa únicamente.**
- **Verifique los códigos.** El código en la pantalla del medidor debe coincidir con el código en el envase de las tiras de prueba TRUEtrack que se utiliza y el número de código impreso en el chip de codificación.
- **El medidor muestra los resultados como valores en *plasma*.**
- **Solo use las tiras de prueba TRUEtrack y el control de glucosa TRUEcontrol® con el medidor TRUEtrack.**
- **No los use para diagnosticar diabetes ni para realizar la prueba de glucosa en la sangre a recién nacidos.**
- **Se recomienda utilizar TRUEtrack para realizar la prueba de glucosa en la sangre capilar humana completa únicamente.** No se recomienda el uso de muestras de sangre venosa para TRUEtrack.
- **Realice las pruebas de control de calidad antes de hacer una prueba de sangre por primera vez.**

Nota: *La solución de control de glucosa TRUEcontrol se ofrece en tres niveles para las pruebas de control de calidad. Recomendamos probar al menos 2 niveles de control.*

Póngase en contacto con el lugar en que lo compró o llame para solicitar asistencia para obtener el control.

- **Establezca la fecha y la hora** para los valores promedio matinales correctos.
- Cuando use el medidor por primera vez, revise la unidad de medida que se indica en la pantalla del medidor luego de llevar a cabo una prueba de control o de sangre. El resultado deberá aparecer con la unidad de medida correcta (mg/dl).
- Si los resultados no se muestran con la unidad de medida correcta, **NO** use el medidor NI considere el resultado correspondiente para establecer un tratamiento.

ADVERTENCIA: Al abrir el envase de las tiras reactivas, examine el producto en busca de piezas faltantes, dañadas o rotas. Asegúrese de que la tapa del frasco de las tiras reactivas esté bien cerrada. Si el producto está dañado o la tapa del frasco no está cerrada, **NO** use las tiras reactivas para la prueba; el producto puede dar resultados inexactos. Comuníquese con el departamento de atención al cliente de Trividia Health al 1-800-803-6025 para obtener reemplazo y asistencia.

Información relacionada con la salud

Para los profesionales de la salud:

Para comparar los resultados de TRUTrack con los de un sistema de laboratorio, realice la prueba de sangre con TRUTrack dentro de los 30 minutos de la prueba de laboratorio. Los resultados de TRUTrack se consideran precisos si están dentro del $\pm 20\%$ de los resultados del laboratorio.⁵ Si el paciente ha comido recientemente, los resultados de la punción del dedo de TRUTrack pueden ser hasta 70 mg/dl más altos que los resultados de vena del laboratorio.⁶ No utilice sangre venosa con TRUTrack.

El Manual de garantía y control de calidad contiene instrucciones adicionales para usar el sistema en un centro de salud destinado a la atención de varios pacientes. Este manual está disponible, puede solicitarlo al 1-800-803-6025 o al 1-954-677-4599.

Índice

Guía rápida de prueba.....	dentro de la portada
Información introductoria.....	1-6
Conozca el sistema	
Medidor	8-10
Tira de prueba	11
Etiqueta del envase de las tiras de prueba.....	12
Etiqueta del frasco de control de glucosa.....	13
Cómo empezar	14
Codificación	15-16
Pruebas de control de calidad.....	17
Verificación automática.....	17
Prueba de control.....	18-21
Pruebas de sangre	
Cómo obtener una muestra de sangre.....	22-23
Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre.....	24-25
Mensajes de advertencia de sistema fuera de la escala.....	26
Configuración (hora y fecha)	27-28
Memoria	
Promedios matinales (14 y 30 días)	29
Cómo ver los resultados en la memoria	30
Cuidado, limpieza/desinfección y solución de problemas	
Cuidado de TRUEtrack.....	31-32
Cómo cambiar la pila	33
Solución de problemas	34
Mensajes de la pantalla	35-37
Especificaciones del sistema	38
Composición química.....	39
Garantía del medidor.....	40
Referencias	40




Conozca el sistema

Medidor

Parte frontal del medidor

Parte superior del medidor




- ① **Botón**  : disminuye los números en la configuración, quita el símbolo de control y avanza o retrocede por fecha u hora al ver los resultados guardados en la memoria.
- ② **Botón**  : selecciona configuraciones, muestra los valores promedio matinales y muestra los resultados guardados en la memoria.
- ③ **Botón**  : aumenta los números en la configuración, agrega el símbolo de control y avanza por fecha u hora al ver los resultados guardados en la memoria.
- ④ **Pantalla:** muestra resultados de la prueba, mensajes, instrucciones para el usuario y otra información.
- ⑤ **Puerto de prueba:** inserte la tira de prueba TRUEtrack aquí.

Parte posterior del medidor

Lado derecho del medidor




Lado izquierdo del medidor

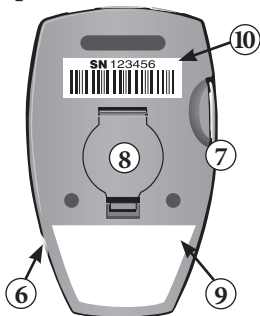

- ⑥ **Puerto de datos:** comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente llamando al número impreso en la portada para obtener más información.
- ⑦ **Puerto del chip de codificación:** inserte el chip de codificación aquí.
- ⑧ **Compartimento de la pila:** use una pila de litio de 3 V no recargable (#CR2032), con el extremo positivo (“+”) hacia arriba.
Nota: Para obtener más información, consulte Cómo cambiar la pila.
- ⑨ **Etiqueta del medidor:** contiene el número de teléfono para obtener ayuda.
- ⑩ **Etiqueta del número de serie:** identifica al medidor cuando se llama para obtener ayuda.

Pantalla

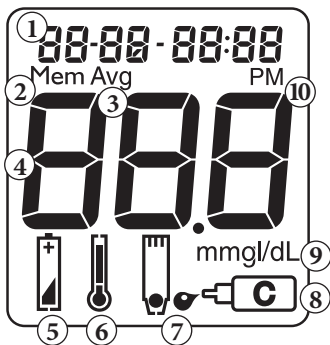

1. Hora, fecha, promedio de 14 o 30 días y código.
2. Resultado guardado en la memoria.
3. Promedio matinal de 14 o 30 días.
4. Resultado de la prueba.
5. Símbolo de la pila (consulte la sección *Mensajes de la pantalla*).
6. Símbolo de la temperatura (consulte la sección *Mensajes de la pantalla*).
7. Símbolo de la gota: aplique sangre o control de glucosa.
8. Símbolo de control (consulte la sección *Prueba de control de glucosa*).
9. Unidad de medida.
Nota: Configurada de fábrica. El usuario no puede cambiarla.
10. Hora indica p. m.
Nota: No aparece “a. m.” (“AM”). No aparece como opción “p. m.” (“PM”) si la configuración de fábrica está en el formato de 24 horas.


Tira de prueba

Parte frontal de la tira de prueba



- ① **Extremo de contacto:** insértelo en el medidor con los contactos (bloques metálicos) hacia arriba **antes** de agregar la muestra.
- ② **Punta para la muestra:** toque la muestra (sangre o control de glucosa) con el borde de la punta.

Colocación de la muestra en la tira de prueba

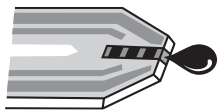

Correcto



Incorrecto

- Deje que la muestra (sangre o gota del control de glucosa) penetre en la punta para la muestra.



Contactos
hacia arriba

¡Precaución! Dejar la punta para la muestra en la gota de sangre demasiado tiempo después de que el medidor comience la prueba puede generar resultados inexactos.

Nota: No aplique sangre o control de glucosa en la parte superior de la tira de prueba.

- No manche ni friegue la gota con la tira de prueba.
- No aplique más muestras a la tira de prueba después de retirarla de la gota.

Nota: No inserte la punta para la muestra con muestra en el medidor para hacer la prueba. Puede dañar el medidor.

Etiqueta del envase de las tiras de prueba

	CODE	1027	①
②	LOT	EA645A4	
	EXP	2018/10/31	③
	0	31-61 mg/dL	
	1	87-117 mg/dL	④
	2	247-335 mg/dL	
	30 de mayo de 2018		③

- ① **Código:** haga coincidir el código de la pantalla del medidor con el código en el chip de codificación y el código en la etiqueta del envase de la tira de muestra **antes** de realizar la prueba. Todos los códigos **DEBEN** coincidir para obtener resultados exactos.
- ② **Número de lote (LOT):** se usa como identificación cuando llama para obtener ayuda.
- ③ **Fechas de vencimiento (EXP):** escriba en la etiqueta del envase la fecha en que lo abrió por primera vez. Deseche el envase y las tiras de prueba sin usar 120 días después de la fecha escrita o la fecha impresa junto a la fecha de vencimiento (EXP), lo que suceda primero.
- ④ **Escala de control:** escala de números en la que debe estar el resultado de la prueba de control para asegurar que el sistema funciona correctamente.

¡Precaución! *El uso de las tiras de prueba o el control de glucosa después de la fecha de vencimiento indicada puede generar resultados de prueba incorrectos. Deseche los productos vencidos y realice la prueba con productos nuevos.*


Control de glucosa

Etiqueta del frasco de control de glucosa



- ① **Número de lote (LOT):** se usa como identificación cuando llama para obtener ayuda.
- ② **Fecha de vencimiento (EXP):** escriba en la etiqueta del frasco la fecha en que se abre por primera vez. Deseche el frasco si transcurrieron 3 meses después de abierto o en la fecha impresa junto a EXP en la etiqueta del envase, lo que suceda primero.
- ③ **Nivel de control (0, 1 o 2):** hay tres niveles de control TRUEcontrol disponibles. Recomendamos probar al menos 2 niveles de control. Use el número que aparece en la portada para informarse sobre cómo obtener los diferentes niveles del control.

Cómo empezar

El medidor se activa automáticamente cuando se inserta el extremo de contacto de la tira de prueba en el puerto de prueba o cuando se presiona el botón  (*consulte las secciones Configuración y Memoria*).

El medidor se apaga automáticamente cuando se retira la tira de prueba del puerto o después de 2 minutos de inactividad.

El medidor viene con la hora y fecha preestablecidas. Antes de usar el medidor por primera vez o después de cambiar la pila, verifique la hora y fecha, y actualícelas según sea necesario (*consulte la sección Configuración*).

Codificación

Cada caja de tiras de prueba viene con un chip de codificación en el envase.

Nota: Después de utilizar todas las tiras de prueba de la caja, retire el código de codificación del medidor y deséchelo. Abra la caja nueva de tiras de prueba e inserte el chip de codificación nuevo en el medidor antes de realizar la prueba.

1. Comience con el medidor apagado. Retire el chip de codificación de la caja de tiras de prueba que utilizará y abra el paquete. Compare el código impreso en el chip de codificación con el código impreso en la etiqueta del envase.



¡Precaución! No utilice las tiras de prueba si no coinciden los códigos.
Llame para obtener ayuda.


2. Si coinciden, inserte el chip de codificación en el puerto del chip de codificación, hasta que quede firme en su lugar.



3. Inserte la tira de prueba en el puerto de prueba. El medidor se activará. Aparecen la palabra “Code” (Código) y un número en la pantalla.



4. Compárelo con el número de código en la etiqueta del envase. Si los códigos coinciden, empiece la prueba.

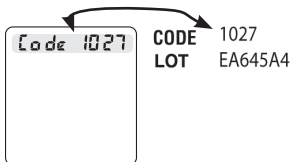

¡Precaución! Si “Code ----” (“Código ----”) aparece en la pantalla, vuelva a insertar el chip de codificación y la tira de prueba. Si “Code ----” sigue en pantalla o los códigos no coinciden, **NO** utilice las tiras de prueba. Los resultados de la prueba podrían ser incorrectos. Llame para obtener ayuda.

Pruebas de control de calidad

Para asegurarse de que está obteniendo resultados precisos y confiables, TRUEtrack le ofrece dos clases de pruebas de control de calidad. Estas pruebas le permiten garantizar que su sistema TRUEtrack funcione correctamente y que su técnica de prueba sea satisfactoria.


Verificación automática

El medidor realiza una verificación automática cada vez que se inserta correctamente una tira de prueba en el puerto de prueba.


Inserte una tira en el puerto de prueba. El medidor funciona correctamente si sucede lo siguiente:

- aparece la pantalla completa;
- aparece la hora en la parte superior de la pantalla; y
- el símbolo de la gota empieza a parpadear.

Si aparece un mensaje de error en la pantalla, el medidor no realizará la prueba. Consulte Solución de problemas o llame para obtener ayuda (en la portada encontrará el número de teléfono).

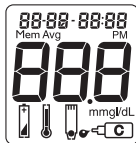

Pantalla completa

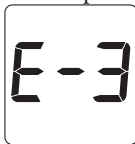

¡Precaución! Si falta algún segmento en la pantalla cuando se enciende el medidor por primera vez, no use el medidor para realizar la prueba. Llame para obtener ayuda.

Prueba de control

Recomendamos hacer algunas pruebas de control de práctica antes de usar el medidor por primera vez para realizar una prueba de sangre.

Se deberán realizar pruebas de control:

- A modo de práctica, para asegurarse de que su técnica de prueba es satisfactoria;
- ocasionalmente, a medida que usa el envase de tiras de prueba;
- cuando se abre un envase nuevo de tiras de prueba;
- cuando los resultados parecen ser excepcionalmente altos o bajos;
- si se dejó abierto un envase o fue expuesto a condiciones extremas de calor o frío o humedad;
- si se sospecha que el medidor está dañado (porque se cayó, fue aplastado, se humedeció, etc.).

Nota: *La solución de control de glucosa TRUEcontrol se ofrece en tres niveles para las pruebas de control de calidad. Es importante realizar las pruebas de control con más de un nivel de control para garantizar que su sistema funcione correctamente y que la técnica de prueba sea satisfactoria. Póngase en contacto con el lugar en que lo compró o llame para solicitar asistencia y obtener el control.*

¡Precaución! *Las escalas de control impresas en la etiqueta del envase de la tira de muestra indican solo los resultados de la prueba de control y **no son** niveles sugeridos para la glucosa en la sangre. **No beba el control de glucosa.***

En la memoria, solo se almacena el resultado de la prueba de control más reciente.

Cómo realizar la prueba del control de glucosa

Solo use la solución de control de glucosa TRUEcontrol® con el medidor TRUEtrack

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón; séquelas bien. Deje que el control, el envase de las tiras de prueba y el medidor se adapten a la temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C (68 °F y 77 °F). Escriba la fecha de la primera vez que lo abrió en la etiqueta de control o en la etiqueta del envase de las tiras.
2. Verifique las fechas en la etiqueta de control y la etiqueta del envase de las tiras de prueba. No use el control si han pasado 3 meses desde la fecha escrita en que fue abierto o después de la fecha impresa junto a EXP, lo que suceda primero. No use las tiras de prueba si han pasado 120 días de la fecha escrita en que fue abierto o después de la fecha impresa junto a EXP, lo que suceda primero. Deseche los productos vencidos y use productos nuevos si cualquiera de estas fechas ya ha pasado.
3. Gire o dé vuelta suavemente el frasco para mezclar el control. ¡NO LO AGITE!
4. Retire la tira de prueba del envase. Vuelva a taparlo de inmediato.

Nota: *Utilice la tira de prueba rápidamente después de retirarla del envase. Las tiras de prueba que quedaron fuera del envase durante mucho tiempo generarán un mensaje de error. Si aparece un mensaje de error en la pantalla, deseche la tira de prueba y repita la prueba con una nueva tira de prueba.*


5. Inserte el extremo de contacto de la tira de prueba (contactos hacia arriba) en el puerto de prueba. El medidor se activará. Mantenga la tira de prueba en el medidor hasta que la prueba haya finalizado.


LOT	8LOA18
EXP	2018/10/31


CODE	1027	
LOT	EA645A4	
EXP	2018/10/31	
0	31-61	mg/dL
1	87-117	mg/dL
2	247-335	mg/dL
30 de mayo de 2018		



Contactos
hacia arriba

6. Compare el código de la pantalla con el código en la etiqueta del envase de la tira de prueba que utiliza. Si los códigos no coinciden, consulte *Codificación*.
7. Presione el botón . El símbolo de control aparece en la pantalla del medidor.

Nota: Si decide no realizar una prueba de control, presione  para quitar el símbolo de control.

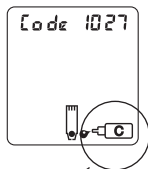

Símbolo de control


8. Dé vuelta el frasco del control, de abajo hacia arriba. Deje caer una gota de control en una toallita de papel limpia. Limpie la punta del frasco.



9. Suavemente deje caer una gota sobre un pequeño trozo de papel de aluminio o envoltorio plástico transparente sin usar. Deséchelo después de usar.



10. Con la tira de prueba todavía en el medidor, toque la gota del control con el borde de la punta para la muestra y deje que la gota penetre en la tira de prueba. Separe la tira de prueba de la gota cuando el medidor emita un pitido. El medidor inicia la cuenta regresiva.

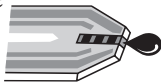

Nota: Si el medidor no emite un pitido o no inicia la cuenta regresiva inmediatamente después de colocar la punta para la muestra en la gota de control, deseché la tira de prueba. Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Si el problema continúa, consulte la sección Solución de problemas.

11. Compare el resultado con la escala de control impresa en la etiqueta del envase de tiras de prueba.

Si el resultado está dentro de la escala, el sistema puede usarse para la prueba de sangre. Si el resultado no está dentro de la escala, repita la prueba usando una tira de prueba nueva.

Nota: Cuando use el medidor por primera vez, revise la unidad de medida que se indica en la pantalla del medidor luego de llevar a cabo una prueba de control o de sangre. El resultado deberá aparecer con la unidad de medida correcta (mg/dl). Si los resultados no se muestran con la unidad de medida correcta, **NO** use el medidor **NI** considere el resultado correspondiente para establecer un tratamiento.


Nota: El resultado de la prueba de control muestra el símbolo de control en la pantalla.

¡Precaución! Si el resultado de la prueba de control está fuera de la escala, vuelva a realizar la prueba. Si el resultado sigue estando fuera de la escala, no se deberá utilizar el sistema para realizar la prueba de sangre. Llame para obtener ayuda (en la portada encontrará el número de teléfono).

12. Retire la tira del medidor y deséchela. El medidor se apaga. Vuelva a tapar bien el frasco de control.



0	31-61	mg/dL
1	87-117	mg/dL
2	247-335	mg/dL

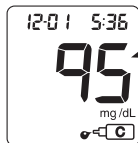

Cómo obtener una muestra de sangre


Consulte las “Instrucciones para el uso” del instrumento de punción para obtener instrucciones detalladas.

¡Precaución! *Sugerimos limpiar y desinfectar el medidor y el instrumento de punción uso para prevenir la transferencia de virus o agentes infecciosos contenidos en la sangre. El instrumento de punción es para el uso de un SOLO paciente. Para limpiar el instrumento de punción consulte la sección Cuidado del instrumento de punción en las Instrucciones para el uso del instrumento de punción.*

- Nunca comparta la lanceta ni el instrumento de punción.
- Las lancetas son para un solo uso. No vuelva a utilizarlas.

De la yema del dedo

1. Prepare la yema lavándose las manos con agua tibia y jabón. Enjuáguelas bien. Séquelas bien.
2. Coloque la punta del instrumento de punción contra la punta del dedo. Haga una punción en la yema con la lanceta.
3. Deje a un lado el instrumento de punción. Para ayudar a que se forme la gota de sangre, baje la mano a la altura de la cintura y masajee suavemente el dedo desde la palma hacia la yema. Espere a que se forme la gota de sangre antes de intentar aplicarla en la tira de prueba.

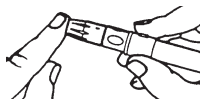


Cuando termine la prueba, siempre vuelva a tapar el envase, retire y deseche la lanceta usada en el recipiente apropiado.

Nota: *Las tiras y lancetas usadas se consideran materiales con riesgo biológico. Deseche las tiras y lancetas usadas en un recipiente aprobado sin riesgo biológico.*

Del antebrazo

1. Escoja la zona donde realizará la punción. Lávela con jabón y agua tibia, enjuáguela y séquela bien.
2. Frote enérgicamente la zona o aplique una compresa tibia para aumentar el flujo de sangre.
3. Coloque firmemente la punta del instrumento de punción contra el antebrazo. Presione el botón disparador. Presione firmemente el instrumento de punción durante 10 segundos.

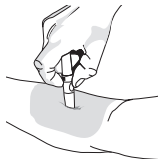

Nota: Algunos instrumentos de punción incluyen un capuchón con punta especial para hacer la prueba en un sitio alternativo. Verifique las Instrucciones para el uso del instrumento de punción.

Notas importantes sobre las pruebas en el antebrazo⁷

- Consulte al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes para saber si en su caso es conveniente realizar la prueba en el antebrazo.
- Los resultados con esta sangre no siempre son los mismos que con sangre de la yema.
- Utilice la yema en lugar del antebrazo para obtener resultados más exactos:
 - Dentro de las 2 horas siguientes a comer, hacer ejercicios o recibir insulina.
 - Si su nivel de azúcar en la sangre sube o baja rápidamente o sus resultados de rutina son, con frecuencia, fluctuantes.
 - Si está enfermo o estresado.
 - Si los resultados de la prueba en el antebrazo no concuerdan con el modo en que se siente.
 - Si su nivel de azúcar en la sangre es bajo o alto.
 - Si no nota síntomas cuando el nivel de azúcar en la sangre es bajo o alto.

Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre

Verifique todos los suministros. Verifique siempre que tiene todos los suministros antes de utilizarlos. Verifique que el medidor no esté dañado (pantalla dañada o con grietas, botones dañados o faltantes). Si nota algún daño, no utilice el medidor. Llame para obtener ayuda. Verifique que los envases de las tiras de prueba no estén dañados. Deseche cualquier envase que aparente estar dañado o roto.

1. Controle las fechas en el envase de tiras de prueba que está utilizando. No las utilice si han pasado 120 días desde la fecha escrita o la fecha que aparece junto a EXP, lo que suceda primero.
2. Lávese las manos (y el antebrazo para realizar una prueba en un sitio alternativo). Enjuáguelas y séquelas bien.
3. Saque la tira de prueba del envase. Vuelva a tapar el envase de inmediato.

Nota: *Utilice la tira de prueba rápidamente después de retirarla del envase. Las tiras de prueba que quedaron fuera del envase durante mucho tiempo generarán un mensaje de error al utilizarlas. Deseche la tira de prueba y utilice una nueva para realizar la prueba.*

4. Con el medidor apagado, inserte el extremo de contacto de la tira de prueba (contactos hacia arriba) en el puerto de prueba. Se activa el medidor. Mantenga la tira en el medidor hasta que la prueba haya finalizado.




5. Compare el código de la pantalla con el código que aparece en el envase de la tira de prueba que utiliza. Si los códigos no coinciden, consulte *Codificación*.
6. El símbolo de la gota aparece en la pantalla.
7. Realice la punción en la yema del dedo o el antebrazo. Deje que se forme una gota.
8. Con la tira de prueba todavía en el medidor, toque la gota de sangre con el borde de la punta para la muestra y deje que la gota penetre en la tira. Retire la punta para la muestra de la tira de la gota de muestra inmediatamente después de que el medidor emita un pitido e inicie la cuenta regresiva en la pantalla.



¡Precaución! Dejar la punta para la muestra en la muestra de sangre demasiado tiempo después de que el medidor comience la prueba puede generar resultados inexactos.

- Nota:** Si el medidor no emite un pitido o no inicia la cuenta regresiva inmediatamente después de tocar la gota de sangre con la punta para la muestra, deseche la tira de prueba. Repita la prueba con una tira de prueba nueva y una gota de sangre nueva. Si el problema continúa, consulte la sección Solución de problemas.
9. Después de la cuenta regresiva, aparece el resultado con la fecha y la hora. Retira la tira de prueba y deséchela. El resultado se almacena en la memoria. El medidor se apaga.

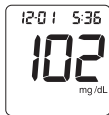

- Nota:** Cuando use el medidor por primera vez, revise la unidad de medida que se indica en la pantalla del medidor luego de llevar a cabo una prueba de control o de sangre. El resultado deberá aparecer con la unidad de medida correcta (mg/dl). Si los resultados no se muestran con la unidad de medida correcta, **NO** use el medidor **NI** considere el resultado correspondiente para establecer un tratamiento.
10. Anote el resultado en el registro.

Nota: Las tiras de prueba y las lancetas usadas se consideran materiales con riesgo biológico. Deseche las tiras de prueba y lancetas usadas en un recipiente aprobado sin riesgo biológico.

Mensajes de advertencia de sistema fuera de la escala

¡PRECAUCIÓN!

TRUEtrack mide los resultados de glucosa en la sangre de 20 mg/dl a 600 mg/dl.

Si el resultado de la prueba de glucosa en la sangre es menor que 20 mg/dl, la pantalla del medidor indicará que el nivel es bajo (“Lo”).



Si el resultado de la prueba de glucosa en la sangre es mayor que 600 mg/dl, la pantalla del medidor indicará que el nivel es alto (“Hi”).




Siempre repita la prueba para confirmar los resultados bajos (“Lo”) y altos (“Hi”). Si los resultados continúan siendo bajos (“Lo”) o altos (“Hi”), llame al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes **inmediatamente**.

Nota: Los resultados bajos “Lo” se incluyen en el promedio matinal como 20 mg/dl. Los resultados altos (“Hi”) se incluyen como 600 mg/dl.

Configuración (hora y fecha)

1. Comience con el medidor apagado. No inserte la tira de prueba.

Mantenga presionado el botón **S**. Aparece la fecha/hora en la pantalla. Suelte el botón **después** de que aparezca la pantalla completa y que el medidor emita un pitido.

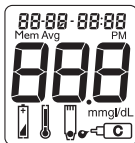


Pantalla completa

Cómo configurar la hora

2. La hora parpadea.

Para cambiarla, presione el botón **+** o **-** en la parte superior del medidor y seleccione la hora. Al igual que con muchos despertadores, para fijar "PM", recorra las horas hasta que aparezca "PM" en la pantalla.

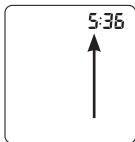

Hora


Nota: No aparecerá en la pantalla "PM" si el medidor está configurado de fábrica en el formato de reloj de 24 horas. Presione el botón **S** para confirmar.

3. Los minutos parpadean.

Para cambiarlos, presione el botón **+** o **-** y seleccione los minutos. Presione el botón **S** para confirmar.



PM

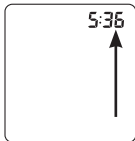

Minutos

Cómo configurar la fecha

4. El mes (número) parpadea.


Para cambiarlo, presione el botón o y seleccione el mes. Presione el botón para confirmar.

5. El día (número) parpadea.

Para cambiarlo, presione el botón o y seleccione el día. Presione el botón para confirmar.

6. El año parpadea.

Para cambiarlo, presione el botón o y seleccione el año. Presione el botón para confirmar.

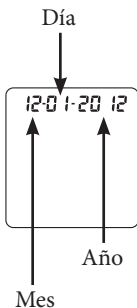

Cómo salir de la configuración

Para revisar la configuración, presione . Realice los cambios necesarios siguiendo las instrucciones anteriores.

Mantenga presionado el botón hasta que la pantalla se ponga en blanco. Se guardan las opciones. El medidor se desactiva.

Memoria

Promedios matinales (14 y 30 días)

Para los valores promedio matinales, se utiliza solo el resultado de la prueba de sangre más temprana realizada entre las 4:00 a. m. y las 9:59 a. m. (según el reloj del medidor).

El reloj del medidor debe configurarse correctamente (consulte la sección *Configuración*) para obtener valores promedio matinales exactos.


1. Comience con el medidor apagado. Presione y suelte el botón **S**. La pantalla muestra el valor promedio matinal de 14 días y, luego, el correspondiente de 30 días.
2. El medidor alterna entre 14 y 30 valores promedio matinales durante 2 minutos antes de apagarse.
3. Si no hubiera valores promedio matinales, aparecen 3 guiones en la pantalla.
4. Presione y suelte el botón **S** para ver los resultados guardados en la memoria. Mantenga presionado el botón **S** para apagar el medidor o bien, el medidor se apaga después de 2 minutos de inactividad.



Promedio
de 14 días



Promedio
de 30 días

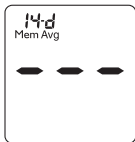

No hay
promedios

Cómo ver los resultados en la memoria

La memoria guarda 365 resultados, que se visualizan desde el más reciente al más antiguo. El resultado más antiguo se elimina de la memoria a medida que ésta se llena y se le agrega un resultado nuevo.

1. Comience con el medidor apagado. Presione y suelte el botón **S**. El medidor muestra la fecha y la hora seguidas de los promedios matinales de 14 y 30 días. Vuelva a presionar el botón **S** para ver el resultado más reciente guardado en la memoria.
2. Presione y suelte el botón **➤** para avanzar al primer resultado de prueba de glucosa en la sangre guardado en la memoria.
3. Presione y vuelva a soltar el botón **➤** para ver el resultado más reciente de la prueba de control. El resultado de la prueba de control muestra el símbolo de control en la pantalla. En la memoria, se almacena solamente un resultado de la prueba de control.
4. Continúe presionando y soltando el botón **➤** para avanzar por los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre. Si mantiene presionado el botón **➤**, avanzará por los resultados rápidamente. Presione y suelte el botón **⊖** para verificar los resultados.
5. Presione y suelte el botón **S** para apagar el medidor. El medidor también se apaga automáticamente después de 2 minutos de inactividad.



Memoria



Símbolo de control

Cuidado de TRUEtrack

La limpieza elimina restos de sangre y suciedad, y la desinfección elimina los agentes infecciosos.

- Sistema de almacenamiento (medidor, control de glucosa, tiras de prueba) en estuche para protegerlos de los líquidos, el polvo y la suciedad.
- Guarde el sistema en un lugar seco a temperatura ambiente, 36 °F a 86 °F.

NO LO REFRIGERE NI CONGELE.

- No deje el medidor en una zona donde podría ser aplastado (por ejemplo, el bolsillo trasero, un cajón, el fondo de un bolso, etc.).

Cuidado del medidor, limpieza/desinfección

La limpieza elimina restos de sangre y suciedad, y la desinfección elimina los agentes infecciosos.

Para limpiar el medidor (quitar la sangre o la suciedad):

- Sugerimos limpiar el medidor cuando este visiblemente súcio. Nunca sumerja el medidor en líquidos, ni permita que ingresen líquidos en el puerto de prueba.
- Limpie el medidor con un paño limpio que no suelte pelusa humedecido con una solución de alcohol isopropílico al 70 %.
- Deje secar bien el medidor al aire antes de usarlo para las pruebas.
- No use lejía para limpiar el medidor.

Si necesita asistencia, llame al Departamento de Atención al Cliente utilizando el número de teléfono que se encuentra en la portada de la Libreta del propietario. Para profesionales de la salud: consulte el Manual de garantía y control de calidad para obtener instrucciones sobre el cuidado, limpieza y desinfección del medidor.

El Manual de garantía y control de calidad contiene instrucciones adicionales para usar el sistema en un centro de salud destinado a la atención de varios pacientes. Este manual está disponible, puede solicitarlo al 1-800-803-6025 o al 1-954-677-4599.

Cuidado del control de glucosa

- Escriba la fecha de apertura en la etiqueta del control. Deséchelo 3 meses después de abierto o después de la fecha impresa junto a EXP, lo que suceda primero.
- Después de usarlo, limpie la punta del frasco y vuelva a taponarlo herméticamente.
- Guárdelo a temperatura ambiente, de 36 °F a 86 °F.
NO REFRIGERE NI CONGELE EL ENVASE.

Cuidado de las tiras de prueba

- Guarde las tiras de prueba únicamente en el envase original. No pase las tiras de prueba viejas al envase nuevo.
- Escriba en el envase de las tiras de prueba la fecha en que lo abrió. Deseche las tiras de prueba sin uso del envase si pasaron 120 días después de abierto o después de la fecha impresa junto a la fecha de vencimiento (EXP), lo que suceda primero. El uso de las tiras de prueba después de cualquiera de estas fechas puede dar resultados incorrectos.
- Cierre el envase de inmediato después de retirar la tira de prueba. Utilice la tira de prueba rápidamente después de sacarla del envase. Nunca guarde las tiras de prueba fuera del envase. Guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 °C (86 °F). **NO LAS REFRIGERE NI CONGELE.**
- No vuelva a utilizar la tira de prueba.
- No doble, corte ni altere las tiras de prueba de ninguna manera.

Cuidado del chip de codificación

- El chip de codificación debe permanecer colocado en el medidor hasta que se utilicen todas las tiras de la caja.
- Inserte el chip de codificación nuevo de la caja nueva de tiras de prueba inmediatamente antes de usar las tiras de prueba.


Cómo cambiar la pila

Cambie la pila cuando el símbolo de pila descargada o agotada aparezca en la pantalla o cuando no se encienda el medidor.

1. Levante la traba de la tapa del compartimiento para la pila.
2. Gire el medidor, golpéelo suavemente para aflojar y extraer la pila.
3. Inserte una pila nueva, con el lado positivo (“+”) hacia arriba. Cierre la tapa.


Nota: Use una pila de litio de 3 V no recargable (#CR2032).

4. Deseche la pila usada en un recipiente apropiado.
5. Encienda el medidor. Si el medidor no se activa, verifique si instaló adecuadamente la pila. Caso contrario, retire la pila, vuelva a colocarla e inténtelo nuevamente. Si el problema continúa, llame para obtener ayuda.

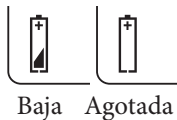

¡Advertencia! La pila no es recargable. Si tiene un cable o un soporte para descargar los resultados en la computadora, **NO** enchufe el extremo del cable USB en un tomacorriente de suministro eléctrico. Intentar recargar las pilas o suministrar energía al medidor enchufándolo al suministro eléctrico provocará que el medidor se prenda fuego o se derrita.

¡Precaución! La pila pueden explotar si no se usan de manera adecuada o se las reemplaza incorrectamente. No arroje la pila al fuego. No desarme ni intente recargar la pila. Deséchela según las reglamentaciones locales/nacionales específicas.

Nota: Al cambiar la pila se pueden afectar las configuraciones de la fecha y la hora. Verifique la fecha y la hora en Configuración y avanzando por las configuraciones de fecha/hora con el botón .

Solución de problemas

1) Al introducir la tira de prueba, el medidor no se enciende.


Razón	Acción
La tira de prueba se insertó al revés, o de atrás para adelante.	Retire la tira de prueba. Vuelva a insertarla correctamente.
La tira no se introdujo por completo.	Retire la tira de prueba. Vuelva a colocar la tira completamente en el medidor.
Error de la tira de prueba	Repita con una tira nueva.
Pila agotada o sin pila.	Cambie la pila.
Pila colocada al revés.	El lado positivo (“+”) de la pila debe quedar hacia arriba.
Error del medidor.	Llame para obtener ayuda.

2) Después de aplicar la muestra, la prueba no comienza/el medidor no emite un pitido o no inicia la cuenta regresiva.

Razón	Acción
La gota de la muestra es demasiado pequeña.	Repita la prueba con una tira de prueba nueva y una gota más grande.
La muestra se aplicó después del apagado a los dos minutos.	Repita la prueba con una tira de prueba nueva y aplique una gota después de que el medidor emita un pitido.
Problema con la tira de prueba.	Repita con una tira nueva.
Problema con el medidor.	Llame para obtener ayuda.

Mensajes

Pantalla

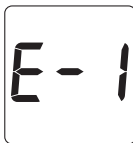


Error de temperatura

Cambio demasiado brusco de la temperatura.

Acción


Antes de realizar la prueba, espere 10 minutos para que el medidor y las tiras de prueba alcancen la temperatura ambiente.

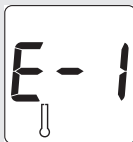

Temperatura demasiado baja

La temperatura del medidor es menor que 50 °F.


Mueva el medidor y las tiras de prueba a una zona con temperaturas de 50 °F a 104 °F.

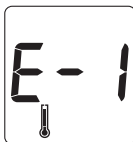

Temperatura demasiado alta


La temperatura del medidor es mayor que 104 °F.

Antes de realizar la prueba, mueva el medidor y las tiras de prueba a una zona con temperaturas de 50 °F a 104 °F.

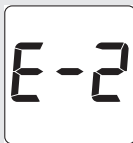

No se detecta la muestra o se está utilizando una tira de prueba incorrecta.

Vuelva a hacer la prueba con una tira nueva o correcta y una muestra más grande.

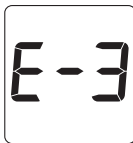

La tira de prueba se usó o estuvo fuera del envase por mucho tiempo.

Repita con una tira de prueba nueva. Si el error continúa, llame para obtener ayuda.

Mensajes (continuación)

Pantalla

E-4

Razón

Error del medidor

Acción

Llame para obtener ayuda.

E-5

Error de la tira de prueba, resultado de la glucosa en la sangre muy alto (mayor que 600 mg/dl).

Repita la prueba con una tira nueva. Si el error continúa, llame para obtener ayuda. Si tiene síntomas como fatiga, micción excesiva, sed o visión borrosa, siga las indicaciones del profesional de atención de la salud para un nivel alto de la glucosa en la sangre.

E-6

Tira de prueba retirada durante la prueba

Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Si el error continúa, llame para obtener ayuda.

E-7

Error del medidor


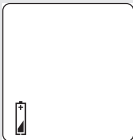
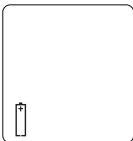
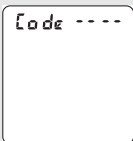


Llame para obtener ayuda.

E-8

Error del chip de codificación

Retire el chip de codificación y vuelva a insertarlo. Si el error continúa, llame para obtener ayuda.

Mensajes (continuación)

<u>Pantalla</u>	<u>Razón</u>	<u>Acción</u>
	Error de comunicación	Apague el medidor y vuelva a encenderlo. Si el error continúa, llame para obtener ayuda.
	Pila con poca carga	Pueden realizar unas 50 pruebas antes de cambiar la pila.
	Pila agotada	Cambie la pila.
	Error del chip de codificación	Retire el chip de codificación y vuelva a insertarlo. Si el error continúa, llame para obtener ayuda.
 	¡ADVERTENCIA! Resultados altos (Hi) fuera de la escala > 600 mg/dl Resultados bajos (Lo) fuera de la escala < 20 mg/dl	¡ADVERTENCIA! Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Si el resultado sigue siendo alto (“Hi”) o bajo (“Lo”), comuníquese con su médico de inmediato .

Especificaciones del sistema

Escala de resultados: 20 a 600 mg/dl

Tamaño de la muestra: mínimo de 1 microlitro (1 μ L)

Muestra: sangre capilar humana completa o solución de control de glucosa TRUEcontrol

Tiempo de la prueba: 10 segundos

Valor del resultado: valores de plasma

Método de ensayo: electroquímico

Método de referencia: Yellow Springs Instrument (YSI)

Suministro eléctrico: una pila de litio de 3 V
#CR2032 (no recargable)

Duración de la pila: aproximadamente 1100 pruebas o 1 año

Apagado automático: después de dos minutos de inactividad

Peso: 47 gramos (1,66 onzas)

Tamaño: 3,52 x 2,15 x 0,67 pulgadas

Tamaño de la memoria: 365 resultados de la prueba de glucosa en la sangre, 1 resultado de la prueba de control

Escala operativa (medidor y tiras de prueba):

Humedad relativa: 10 % a 90 % (sin condensación)

Temperatura: 50 °F a 104 °F

Hematocrito: 30 % a 55 %

Nota: *Use el sistema solamente en las condiciones ambientales especificadas*

Composición química

Tiras de prueba TRUEtrack: glucosa oxidasa (*Aspergillus sp.*)
2,5 unidades, mediadores, amortiguadores y estabilizadores.

Control de glucosa TRUEcontrol: Contenido: Volumen: 3 ml, agua:
73 %; d-glucosa: 0,09 % a 0,20 %; agente que mejora la viscosidad:
25 %; sales inorgánicas: 1,8 %; amaranto: 0,08 %; conservantes;
0,03 %.

Garantía limitada para toda la vida de TRUEtrack

Trividia Health, Inc. ofrece la siguiente garantía al comprador original del medidor TRUEtrack:

- 1) Trividia Health, Inc. garantiza que este medidor no presenta defectos de materiales ni de fabricación en el momento de la compra. Si el medidor alguna vez deja de funcionar, Trividia Health, Inc. lo reemplazará por un medidor igual, según su criterio, sin costo para el comprador. Esta garantía no cubrirá las fallas del medidor debidas al maltrato o por no haberse utilizado de acuerdo con las instrucciones para el uso.
- 2) Esta garantía no cubre la pila suministrada con el medidor.
- 3) No desarme el medidor. Esta acción anulará la garantía y hará que el medidor muestre resultados falsos.
- 4) La duración de la garantía implícita, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado, se limitará a su vida útil para uso del usuario original de conformidad con cualquier ley estatal en contrario.
- 5) Trividia Health, Inc. desconoce toda responsabilidad por daños accidentales o emergentes derivados del incumplimiento de las garantías expresas o implícitas, incluyendo la garantía de comerciabilidad o aptitud para un uso determinado del medidor. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o emergentes, por lo que es posible que las limitaciones o la exclusión antes mencionadas no rijan en su caso.
- 6) Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos, y el usuario también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Si es necesario, el representante del Departamento de Atención al Cliente de Trividia Health, Inc. podrá brindarle información detallada sobre los procedimientos para devolver el medidor.

Referencias

1. American Diabetes Association. *Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus*. Diabetes Care, Volume 37, Supplement 1, January 2014.
2. FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood Borne Pathogens: Initial Communication (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices>.
3. CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than one Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>.
4. Atkins, S. H., Dasmahapatra, A., Jaker, M.A., Chorost, M. I., Redd, S., *Fingerstick Glucose Determination in Shock*. Annals of Internal Medicine, 114:1020-1024, 1991.
5. Data on file.
6. Larsson-Cohn U: Difference between capillary and venous blood glucose during oral glucose tolerance tests. Scand J Clin Lab Invest 36:805-808, 1976.
7. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Versión electrónica]. Obtenido el 22 de diciembre de 2009 de <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm>.